




## siRNA 導入効率が低く RNAi 実験をあきらめていた方に朗報

- Accell siRNA ならトランスフェクション試薬は不要
- トランスフェクション試薬の細胞への影響を抑えることが可能
- 専用培地 (Delivery media) と siRNA を混合して細胞を培養するだけ
- 初代細胞、神経細胞、免疫細胞など様々な細胞で siRNA 導入実績

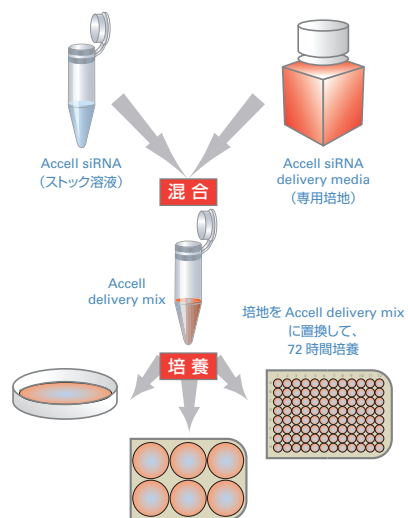

これまでにトランスフェクションが報告されている細胞の例  
(1 $\mu$ M Accell siRNA と専用 Delivery Media を使用)

<i>Human adherent cell lines</i>		<i>Primary cells</i>	
SH-SY5Y	IMR32	HUVEC	HUASMC
HeLa	LAN5	hMSC	
A549	293T	Primary Hu-astrocytes	
U87MG	LNCap	Primary Hu-keratinocytes	
HEK293	A-375	Primary Hu-T cell	
Huh7	MCF-7	Primary Mo-hepatocytes	
HepG2	OVCAR-3	Primary rat-cortical neurons	
<i>Human suspension cell lines</i>		<i>Mouse and rat cell lines</i>	
Jurkat	IM-9	NIH 3T3	ES-D3
THP-1	PBMC	H9c2	PC-12

# Accell siRNA コントロールキット

約**45%**  
**OFF**

お使いの細胞で Accell siRNA をお試しください

Accell siRNA コントロールキットは、Accell siRNA の評価に便利な試薬をパッケージにしたキットです。



## ポジティブコントロール siRNA

ノックダウン効果確認済みの siRNA です。お使いの細胞に対する Accell siRNA 導入効率の評価や、実験条件の検討に用います。



## ネガティブコントロール siRNA

ヒト・マウス・ラットの既知遺伝子配列と類似しない配列の siRNA で、ターゲット遺伝子に対する siRNA による特異的なノックダウンの評価に使います。



## 蛍光標識コントロール siRNA

蛍光により細胞導入が確認できる siRNA です。Green もしくは Red 蛍光色素をネガティブコントロール siRNA に標識しています。



## Accell siRNA delivery media

Accell siRNA 導入時に用いる専用培地です。無血清条件における細胞培養に重要な成分が含まれています。必要に応じて 1-3% の血清を添加します。

### Accell siRNA コントロールキット構成品 (Accell Control siRNA Kits)

製品	容量	参考価格
Accell Cyclophilin B Control siRNA	5 nmol	¥29,000
Accell GAPD Control siRNA	5 nmol	¥29,000
Accell Non-Targeting siRNA #1	5 nmol	¥37,000
Accell (Green or Red) Non-Targeting siRNA*	5 nmol	¥44,000
5x siRNA buffer	1.5 mL	(サンプル)
Accell siRNA delivery media	100 mL	¥3,200

合計 ¥142,200

別々に購入するよりも約**45%**もお得!



製品コード	製品	生物種	参考価格
K-005000-G1-01	Accell Control siRNA Kits (Green)*	Human	<b>¥78,000</b>
K-005000-G1-02		Mouse	
K-005000-G1-03		Rat	
K-005000-R1-01	Accell Control siRNA Kits (Red)*	Human	
K-005000-R1-02		Mouse	
K-005000-R1-03		Rat	

\* 蛍光色素の種類により、Green、Red の 2 種類があります。  
Green: Abs 494 nm, Em 520 nm / Red: Abs 557 nm, Em 570 nm

掲載している製品の価格は 2010 年 5 月現在の参考価格で消費税は含まれておりません。参考価格はお客様がご購入の際に目安となる価格で、弊社製品販売店が自主的に設定する販売価格を制限するものではありません。販売価格は弊社製品販売店にお問い合わせください。掲載製品は研究用の製品です。試験研究目的以外に使用しないでください。掲載内容は予告無く変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。本価格表の掲載価格と web 上の価格が異なる場合、web 上の価格が最新の参考価格となります。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社  
バイオサイエンス事業本部

販売店

本社 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町 3-9 C 棟 2F  
TEL 045-453-9089 FAX 045-453-9110  
東京オフィス 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-43-16 成田ビル 6F  
TEL 03-3811-3621 FAX 03-3811-3632  
e-mail : sales.bid.jp@thermofisher.com  
www.thermoscientific.jp/bid/